




Produkt Varenummer	PLUS ryglæn til fastmontering R6408112
Farve	Antracitgrå
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 777530312 NRF: 6317037 EAN: 5708590365428 HMI: 124218</p>  <p>PLUS ryglæn fås i flere farver og versioner, de fås både som fastmonterede og regulérbare. De er velegnede til brug bag et væghængt toilet uden cisterne eller til montering på en af Pressalits toiletløftere.</p> <p>PLUS ryglæn, 385 x 209 mm, polstret. Fast højde, til montering direkte på SELECT TL1, TL2, TL3 eller TL4 toiletløfter. Materialer: Aluminium og blødt porskum med trækerne. Monteringskit til montering på toiletløfter medfølger.</p>
Justerbarhed Produktkapacitet	<p>Fastmonteret</p> <p>Maksimal belastning: 50 kg. Maksimal brugervægt: 100 kg. Når ryglænet belastes med 50 kg, belastes hver vægmonterings skrue med 118 kg. <i>Ryglæn skal kunne bære vægten af en person der støtter sig til det.</i> Ryglæn er ikke personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for ryglæn afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at ryglæn testes statisk med 50% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et ryglæn er 50 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 100 kg støtter sig til ryglænet.</p>
Materialer	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl.



Produkt	PLUS ryglæn til fastmontering
Varenummer	R6408112
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en antibakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

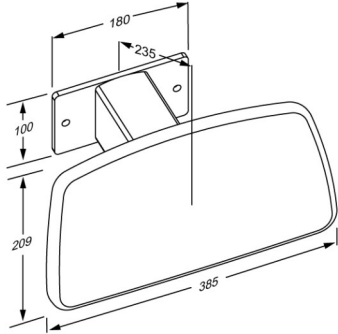

PRESSALIT®

Produkt	PLUS ryglæn til fastmontering
Varenummer	R6408112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®